


ДИЖИТАЛ СЕНСОРЫН ШИНЭ ХУВЬСГАЛ

EzSensor HD™



ӨНДӨР НЯГТРАЛ

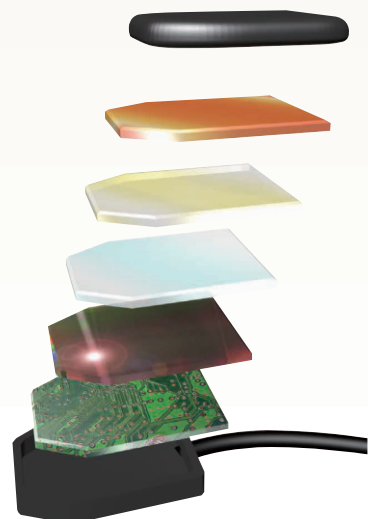

4.8 ММ-ИЙН МАШ НИМГЭН ДИЗАЙН



ТӨГС ЗУРАГ ГАРГАХ ШИНЭ ТОДОСГОГЧ ШҮҮЛТҮҮРҮҮД



HD ӨНДӨР НЯГТРАЛ


EzSensor HD сенсор нь зураг хүлээн авах мэдрэг чанар илүү сайн тул зах зээл дээрх бусад сенсоруудтай харьцуулахад олон давуу талтай. Зураг хүлээн авах хугацаа богиноссоноор ажлын цагийг хэмнэхээс гадна зураг авч буй эмч, өвчтөн хоёр рентген туяанд өртөх магадлалыг харьцангуй багасгаж өгч байгаа юм. Мэдрэг чанар сайжирснаар туяа тасалддаг хуучин рентген аппаратаар ч зураг авахад ямар нэгэн асуудал гарахааргүй болсон юм.

	65 kVp 6 mA 8 cm Al Filter								65 kVp 6 mA No Filter											
(mGy)	0.020	0.025	0.030	0.040	0.050	0.060	0.100	0.125	0.160	0.200	0.250	0.320	0.400	0.500	0.630	0.800	1.000	1.250	1.600	2.000
(sec)	0.04	0.05	0.06	0.08	0.1	0.12	0.20	0.26	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.16	0.20	0.25	0.32	0.40	0.51	0.63

CLEAR ТӨГС ЗУРАГ БҮТЭЭХ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ТОДОСГОГЧ ШҮҮЛТҮҮРҮҮД

7 төрлийн зураг тодосгогч нэмэлт шүүлтүүрийг та авсан зураг дээрээ байршуулж, хамгийн тохиромжтой нэгийг сонгож хэрэглэх боломжтой. Дүрсний тодрол ихтэй шүүлтүүрийг шүдний тойрон эдийн эмгэгийн үед, харин тодрол багатай шүүлтүүрийг нөхөн сэргээх эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Хэрэв та EzSensor HD сенсор хэрэглэдэг бол эдгээр тодосгогч шүүлтүүрүүдийг хэрэглэж заншаарай.

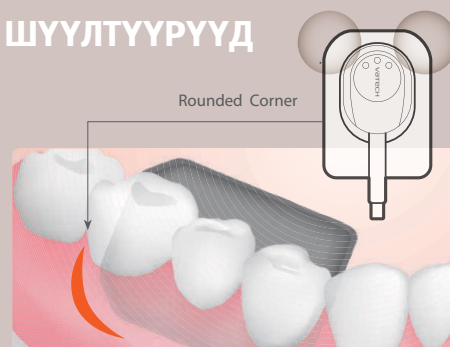

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (EzSensor HD : IOS-U10IF / IOS-U15IF / IOS-U20IF / IOS-U10VF / IOS-U15VF / IOS-U20VF)

Дүрс хүлээн авагч	CMOS	Пикселийн хэмжээ	14.8 мкм
Нягтрал CMOS	33.78 lp/mm	Динамик хүрээ	12 бит
Мэдрэгчийн хэмжээ (Өр х Ур)	Хэмжээ 1.0: 20x30 мм	Хэмжээ (Өр х Ур х Зу)	Хэмжээ 1.0: 25.4x36.8 мм (1.00"x1.45")
	Хэмжээ 1.5: 24x33 мм		Хэмжээ 1.5: 29.2x39.5 мм (1.14"x1.55")
	Хэмжээ 2.0: 26x36 мм		Хэмжээ 2.0: 31.3x42.9 мм (1.23"x1.69")
Зузаан	4.8 мм (0.19")	Кабелийн урт	2.7 м

[Хэрэглэх зориулалт]

EzSensor HD сенсор нь шүдний рентгенээс ирж буй фотонуудыг цуглуулж, электрон импульс болгон хувиргаснаар та рентген зургийг компьютерт оруулдаг. Ингэснээр рентген зураг хадгалах, үзэх, оношилгооны зориулалтаар ашиглах боломжтой болдог.

vatech
mongolia

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, Хоймор оффис, 504 тоот.
sales@vatechmongolia.com www.vatechmongolia.com 70117475
[Facebook.com/VatechMongolia](https://www.facebook.com/VatechMongolia)